


Spéculum à usage unique

# GYNOSPEC<sup>®</sup>

Dispositif Médical  
Classe I - Stérile - Directive CE 93/42



Fabriqué en France  
par  
**CEB**

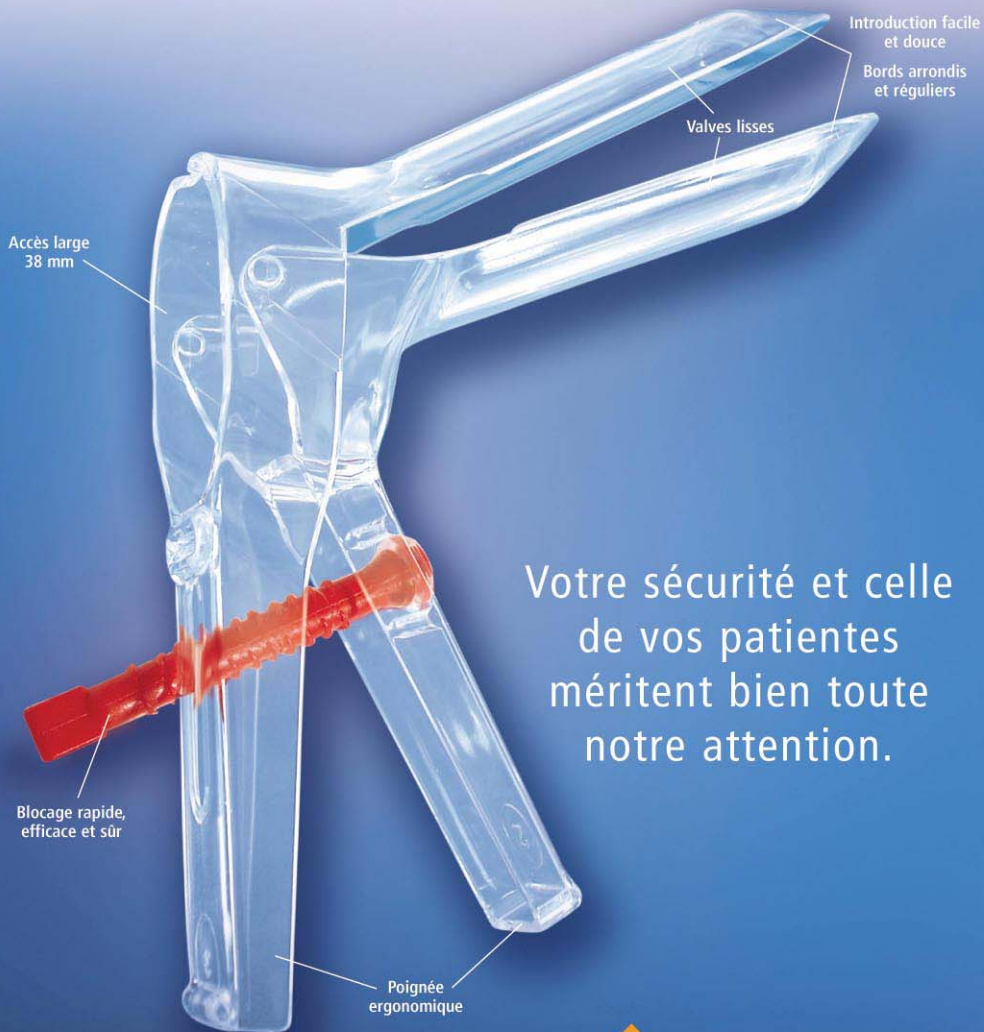

Votre sécurité et celle  
de vos patientes  
méritent bien toute  
notre attention.



# GYNOSPEC®

Dispositif Médical Classe I • Stérile  
(Directive CE 93/42)

CE 0123



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

### Usage unique :



- STÉRILE ET TOUJOURS PRÊT À L'EMPLOI.
- SÉCURISE LA PATIENTE sur le risque de contamination croisée.

### Sachet :



2007-06-30

- SACHET PELABLE ET ÉTANCHE À OUVERTURE FACILE.
- NUMÉRO DE LOT et DATE DE PÉREMPTION sur CHAQUE SACHET.
- LA POIGNÉE EST TOUJOURS ORIENTÉE CÔTÉ OUVERTURE DU SACHET pour une prise en main rapide et hygiénique.

### Contrôles systématiques en production :

- RÉSISTANCE MÉCANIQUE : validée par tests d'écrasement.
- BIOCOMPATIBILITÉ : évite les allergies et irritations chez votre patiente.
- TESTS VISUELS pour une parfaite transparence et netteté du produit.
- BIOCHARGE et STÉRILITÉ conformément aux normes ISO11137 et EN 556.



## CONFORT

**Poignée ergonomique :** pour des GESTES DOUX, SÛRS et RASSURANTS.

**Mise en place facilitée :** grâce à ses VALVES PROFILÉES, LISSES et aux BORDS NETS.  
Supprime les douleurs pour votre patiente.

**Le Gynospec® reste toujours maintenu ouvert en utilisation :**  
BLOCAGE EFFICACE et RAPIDE par une clé à 11 positions.


**Le polystyrène cristal supprime la sensation de froid.**

**Identification visuelle des 2 tailles :**

clé rouge ou verte selon la largeur des valves.

**CLÉ ROUGE :**  
largeur 24 mm

**CLÉ VERTE :**  
largeur 30 mm

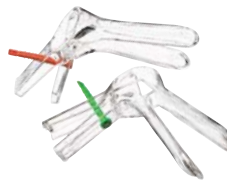

*Manipulation indolore,  
rapide et silencieuse,  
sécurisante pour le  
Praticien et la Patiente*

## ECONOMIE

### Boîte de 25 Gynospec® :

- le Gynospec® est livré par boîtes de 25 pièces cerclées par 4.

### Élimination du Gynospec® plus facile :

- le sachet est conçu pour être ouvert proprement ; Il peut être utilisé pour l'élimination du spéculum après usage.